

醫聖論質檢驗作業系統操作手冊

➤ 檢體檢驗報告輸入方式

- ◆ 使用醫聖檢驗轉入系統（加值軟體）直接轉入報告資料（省時省工）
- ◆ 自行檢驗項目或未加購檢驗轉入系統登打操作說明
 1. 處置有鍵入健保申報檢驗醫令項目時

病歷:888888 全富貴(女/) 生日:110.09.21 年齡:002.00.03 ID:Z299999992 看診日:112.09.24/1 序號:1 案:01(部:902) 卡:A000 注意 !! 該病患較特殊 !!

F2 掛號清單 F3 診療作業/888888(平均2.73項) F4 歷史病歷 F5 過敏/檢查/醫囑/提醒 F6 放射科檢查

主訴搜尋

體重 0.0 KG
體溫 0.0 °C
血壓 0/0
LMP . . . 1/2

常用 完全 24小時尿液 候診/家族 歷史病歷[B] 遠端病歷

S 自定名稱 簡稱

ICD-9	icd10
4659 急性上呼吸道感染	J069

處置名稱	數量	途徑	用法	天	總量	註	標(刪)
14065C流感A型抗原	1.00			1.00	1次		
14066C流感B型抗原	1.00			1.00	1次		

2. 點選左側『檢查項目選單』或點選下方『病歷轉入』將檢驗項目帶入結果登打區
「檢查報告日期」（預設空白，可選填為實際收到報告日期）

病歷:888888 全富貴(女/) 生日:110.09.21 年齡:002.00.03 ID:Z299999992 看診日:112.09.22/1 序號:8 案:01(部:902) 卡:A000

F2 調閱清單(空富貴) F3 診療作業/888888(平均2.73項) F4 歷史病歷 F5 過敏/檢查/醫囑/提醒 F6 放射科檢查

A 過敏藥物與特別記載 B 檢查報告 C 診斷證明與醫囑 D 提醒事項與幼兒預注 E 孕婦E肝產檢

檢查項目選單

檢查報告日期 : . . . 1/2 檢查報告 確診追蹤

檢查項目(學名/成份)	檢驗值	檢查結果	參考範圍
14065C流感A型抗原	0.00	陽性	陰性(-) 正常
14066C流感B型抗原	0.00	陰性	陰性(-) 正常
GLUCOSE AC	120.00	不正常	70.00~100.00 正常
	數值	非數值	

H 調閱報告 一次輸入[K] M 轉至主訴 P 存入套餐 F 取用套餐 S 存檔

➤ 影像報告及病理報告(文字報告)輸入方式

1. 基本設定

於藥品資料，點選『藥袋警語』、**勾選**「此健保碼(轉論質報告)」、**點選**報告類別'2:影像
例如：X光檢查、超音波檢查、心電圖.....等類別

Durg_No:0137(136) 重要醫令:0 包裝單位: 檢驗值最低/高值0.00~0.00

簡稱	EKG	健保碼	18001C	批號		藥品簡稱	自定名稱
商品名稱	18001C E. K. G						
自定名稱	EKG 心電圖						
學名成份	Electrocardiograph						
診療類別	F. 檢查	劑量/用量	0.0	0.00	總價/單價	150.00	150.00
自定分類		進價/單價	0.00	0.00	單價為0不檢查		
治療代號		自費/金額		0.00	排列順序	1970	1
手術代號		疫苗劑別	0		藥帶主訴		

藥袋警語與藥品禁忌編輯系統(健保碼:18001C)

適應症

指示警語

副作用

--藥品禁忌使用方式的選擇設定--

幾歲以上 幾歲以下 含生日 藥品開立方式 . 無需判斷

藥品/處置對於 . 無需判斷 案件類的開立方式 . 無需判斷

懷孕婦女=>藥品開立方式 . 無需判斷

性 男 \ 藥品開立方式 . 無需判斷

別 女 / 藥品開立方式 . 無需判斷

↓可開立此醫令醫師↓

醫師姓名	醫師姓名

此健保碼(18001C)轉論質報告
此健保碼(18001C)報告類別:
 1:檢驗 2:影像 3:病理

存檔[S] 離開[X]

藥袋警語 有效日 .. 警告日 ..

新增 F2 修改 F3 篩選 F4 刪除 F5 存檔 F9 體重藥量 F6 列印 檢驗值 Esc

於藥品資料，點選『藥袋警語』、**勾選**「此健保碼(轉論質報告)」、**點選**報告類別 3:病理
 例如：病理切片檢查

The screenshot shows a software window titled 'Durg_No: 6WO(2382) 重要醫令:0 包裝單位: 檢驗值最低/高值0.00~0.00'. The main window contains a form for drug information with fields for '簡稱' (25001), '健保碼' (25003C), '批號', and '藥品簡稱' (自定名稱). The '商品名稱' is '25003CSurgical pa' and '自定名稱' is '25003C第三級外科病'. The '學名成份' is '第三級外科病理' and '診療類別' is 'F. 檢查'.

An overlay dialog box titled '藥袋警語與藥品禁忌編輯系統(健保碼:25003C)' is open. It has several input fields for '適應症', '指示警語', and '副作用'. Below these is a section for '藥品禁忌使用方式的選擇設定--' with options for '幾歲以上' (0), '幾歲以下' (0), and '含生日'. There are also dropdowns for '藥品開立方式', '藥品/處置對於', and '案件類的開立方式'. A section for '懷孕婦女=>藥品開立方式' has radio buttons for '男' and '女'. A table below shows '醫師姓名' columns. A checkbox is checked for '此健保碼(25003C)轉論質報告', and the report type '3:病理' is selected with a radio button. At the bottom of the dialog are '存檔[S]' and '離開[X]' buttons.

At the bottom of the main window, there is a '藥袋警語' button highlighted with a red box, and a '存檔 F9' button highlighted with a blue box. Other buttons include '新增 F2', '修改 F3', '篩選 F4', '刪除 F6', '檢驗值', and 'Esc'.

2. 登打方式

滑鼠左鍵雙擊已設定的檢查醫令項目，會詢問是否要填寫報告內容
按『是』可開啟內容登打視窗；按『否』可開啟藥品資料編輯畫面

病歷:888888 金富貴(女/) 生日:110.09.21 年齡:002.00.03 ID:Z299999992 看診日:112.09.24/1 序號:1 案:01(部:902) 卡:A000 注意 !! 該病患較特殊 !!

F2掛號清單 F3診療作業/888888(平均2.73項) F4歷史病歷 F5過敏/檢查/醫囑/提醒 F6放射科檢查

主訴搜尋
 體重 0.0 KG
 體溫 0.0 °C
 血壓 0/ 0
 LMP . . . 1/2
 叫號 檢驗

處置名稱	數量	途徑用法	天	總量	註標(刪)
EKG 心電圖	1.00		1.20	1.20 次	

Attention
 此健保碼被設定為論質報告, 您是否要填寫報到內容?
 是[Y] 否[N]

命列: 金富貴 年齡:002.00.03 時間 08:51:06
 複診 加入病歷 清除點選 處置 2.磨粉

F7 F8 F11 F12 LOOK 建議 藥組 IC 資訊 過敏藥物 轉診作業 F9 糖尿病 Esc

點選「報告日期」(非當日登打時)、「報告醫師」及輸入「報告內容」

論質檢驗報告 ? X






姓名: 金富貴 生日: 110.09.21 病歷號: 888888

檢驗單號: 1120900001 報告日期: 112.09.21 12 報告醫師: 郝醫師

報告內容: 健保碼: 18001C 檢驗名稱: EKG 心電圖


填寫影像文字型報告檢查結果

影像檔案上傳區 (如X光圖檔'心電圖檔'超音波圖檔...等格式使用)


-  圖像管理
-  刪除影像
-  新增影像
-  存檔
-  離開

➤ 檢驗(查)結果每日上傳作業 API 上傳方式

1. 點選『O 其他功能』>『論質檢驗作業』

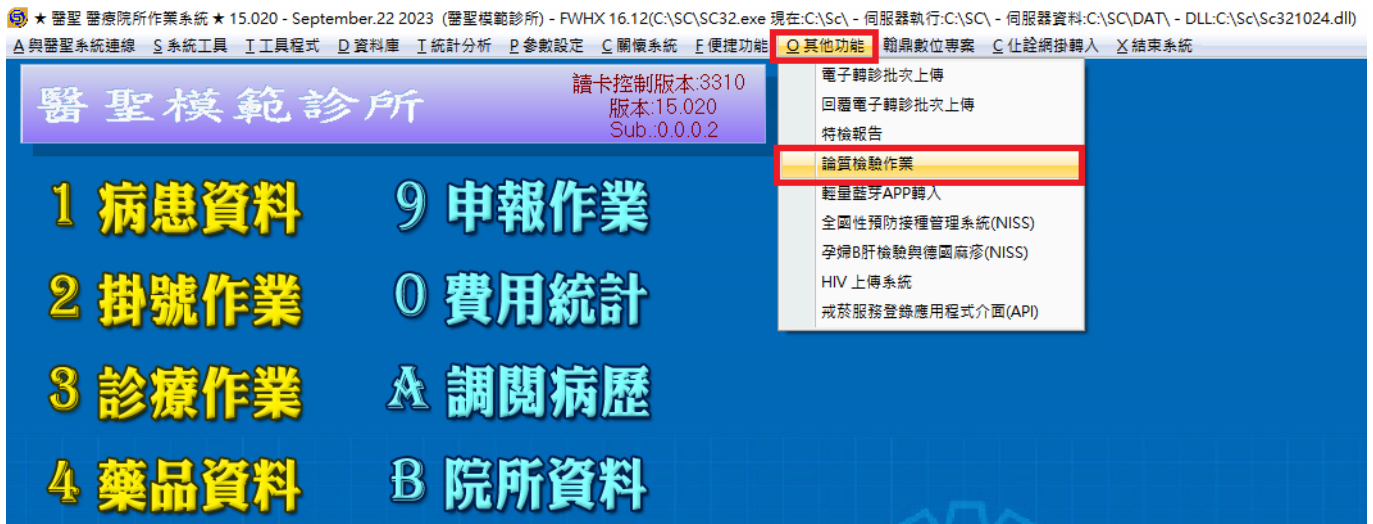

2. 勾選要上傳對象、點選『轉 XML 上傳』、點選『自動上傳』
上傳成功後，務必登入健保資訊網服務系統(VPN)網站查詢檢核結果是否正確

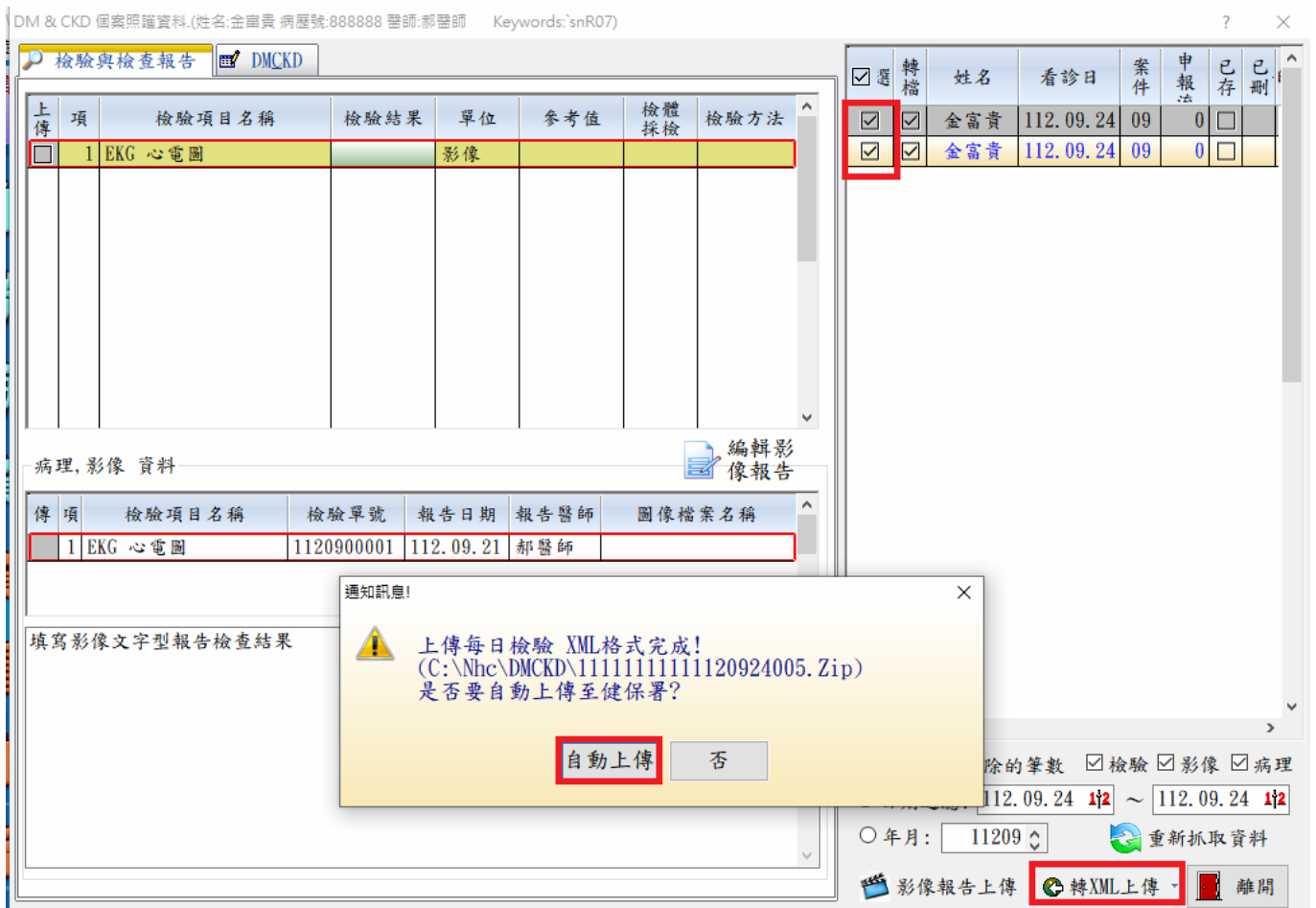

論質檢驗作業系統操作介面說明

- 左側檢驗(查)報告資料顯示區：

檢驗與檢查報告 DMCKD

上傳	項	檢驗項目名稱	檢驗結果	單位	參考值	檢體採檢	檢驗方法
<input type="checkbox"/>	1	14065C流感A型抗原	陽性	N/A	Negative	鼻腔拭	抗原試劑
<input type="checkbox"/>	2	14066C流感B型抗原	陰性	N/A	Negative	鼻腔拭	抗原試劑
<input type="checkbox"/>	3	GLUCOSE AC	120.00	mg/dl	70-100	血液	全自動儀
檢體檢驗結果值上傳區							


病理, 影像 資料

 編輯影像報告

傳	項	檢驗項目名稱	檢驗單號	報告日期	報告醫師	圖像檔案名稱
影像/病理 檢查結果影像檔案上傳區						
影像/病理 文字報告上傳區						

- 點選『編輯影像報告』可開啟編輯登打視窗

病理, 影像 資料

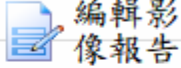 編輯影像報告

傳 項	檢驗項目名稱	檢驗單號	報告日期	報告醫師	圖像檔案名稱
1	EKG 心電圖	1120900001	112. 09. 21	郝醫師	

填寫影像文字型報告檢查結果

- 可分類勾選僅顯示『檢驗』『影像』『病理』項目

顯示標記刪除的筆數 檢驗 影像 病理

◎ 日期過濾: 112. 09. 24 12 ~ 112. 09. 24 12


○ 年月: 11209  重新抓取資料


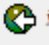

 影像報告上傳  轉XML上傳  離開

- 可點選以「日期區間」或以「年月」再按「重新抓取資料」顯示



顯示標記刪除的筆數 檢驗 影像 病理

◎ 日期過濾: 112. 09. 24 12 ~ 112. 09. 24 12

○ 年月: 11209  重新抓取資料


 影像報告上傳  轉XML上傳  離開

- 影像報告上傳（指上傳電子檔格式使用），其他格式皆點選『轉 XML 上傳』

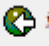 影像報告上傳  轉XML上傳  離開


➤ 檢驗(查)結果上傳轉檔錯誤明細表處理方式說明

- 上傳跳出轉檔錯誤明細表視窗時，可點選印表機圖示印出或點選 EXCEL 圖示轉出檔案

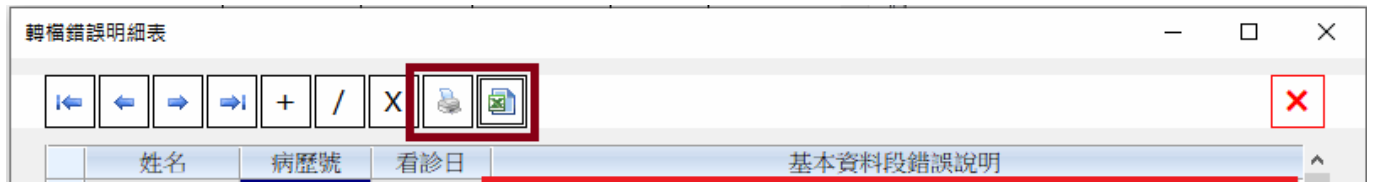

■ 基本資料段錯誤說明 – 型態一

找不到每日檢驗上傳有檢驗醫令相對應資料!

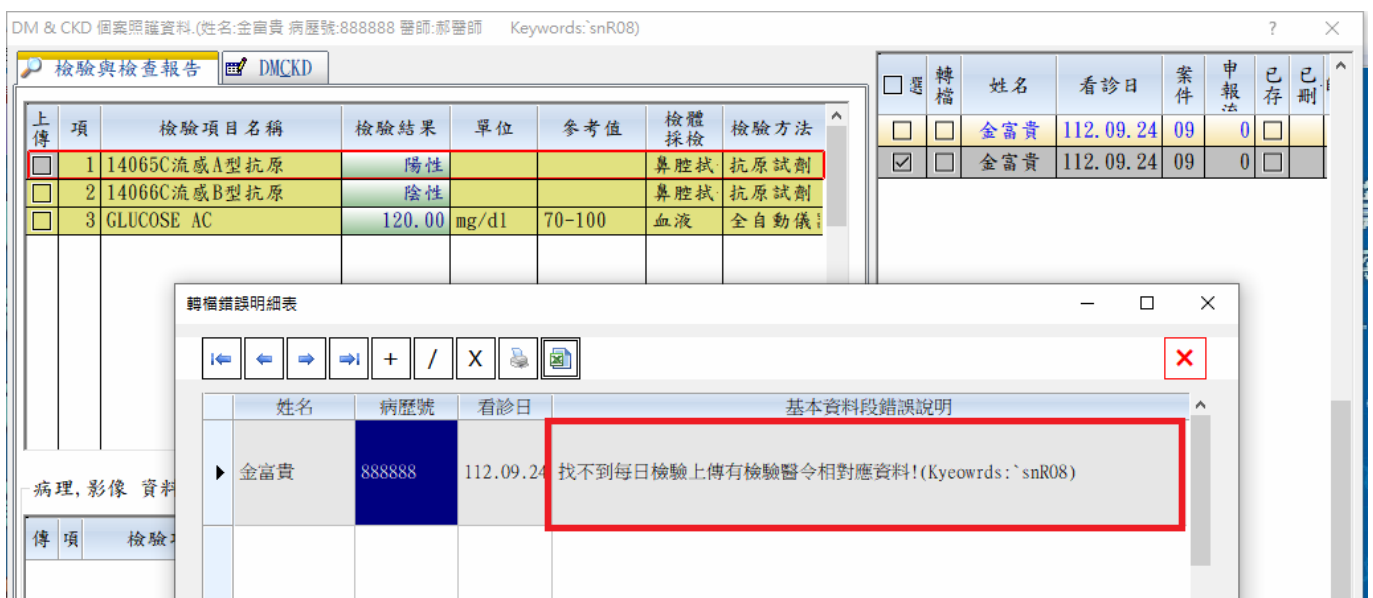


確認檢驗醫令是否有寫入 IC 上傳區，若未出現在此區請重新執行更新 IC 上傳資料流程

序	就診日期	類別	診療代號	診療項目名稱	診療部位	用法	天數	總量	交付註記	上傳	藥品代碼
1	1120924091	3	14065C	流感A型病毒抗原			1	1.0	03 自行物理治療	0	14065C
2	1120924091	3	14066C	流感B型病毒抗原			1	1.0	03 自行物理治療	0	14066C
3	1120924091	3	09005C	GLUCOSE AC			1	1.0	03 自行物理治療	0	GLU


IC上傳 (每日上傳) 醫令區需有對應上傳的健保碼資料

【傳】欄位處 滑鼠左鍵兩下, 可以更改上傳次數


於『掛號 F2』操作介面

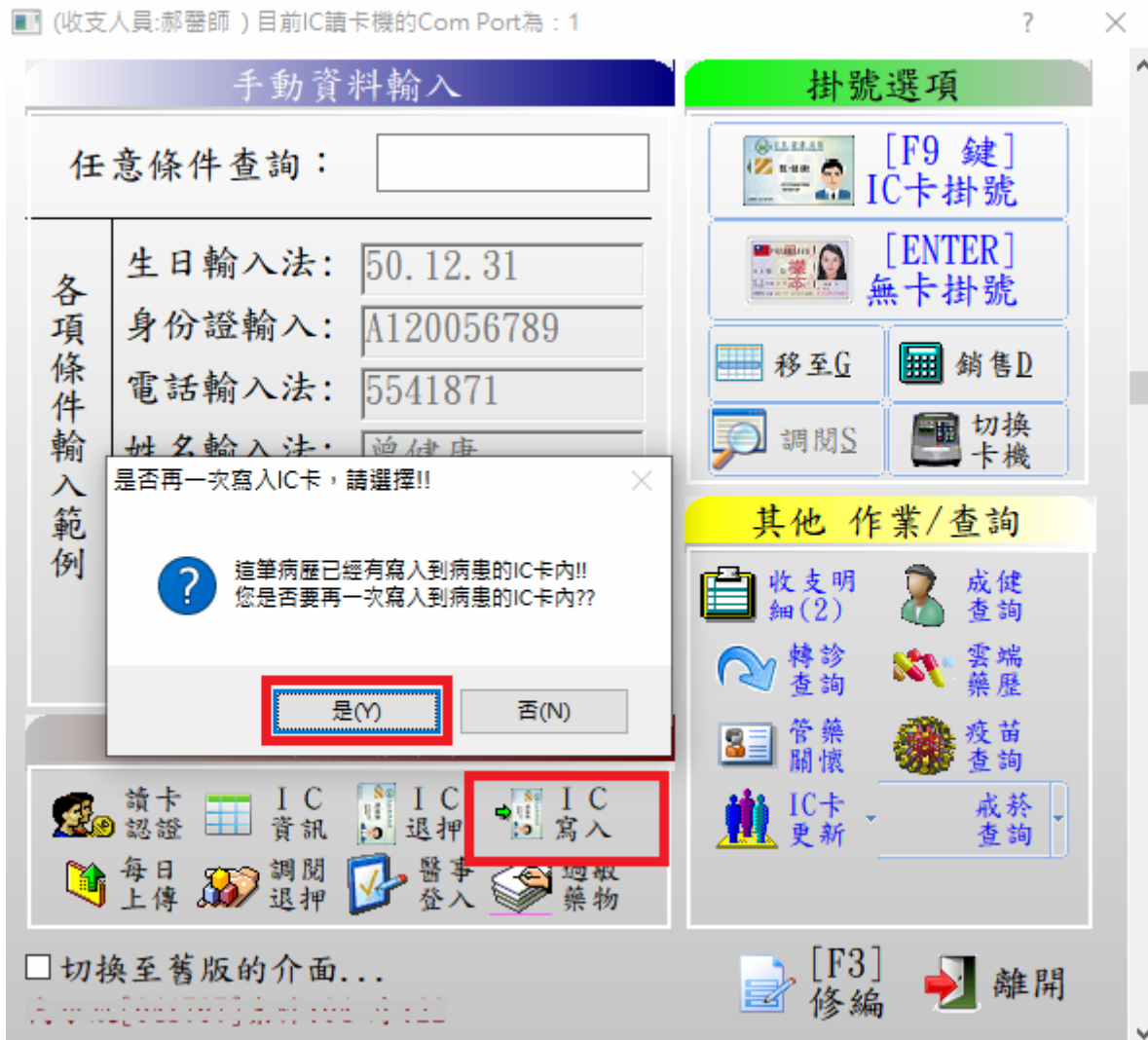

於『批價作業』操作介面

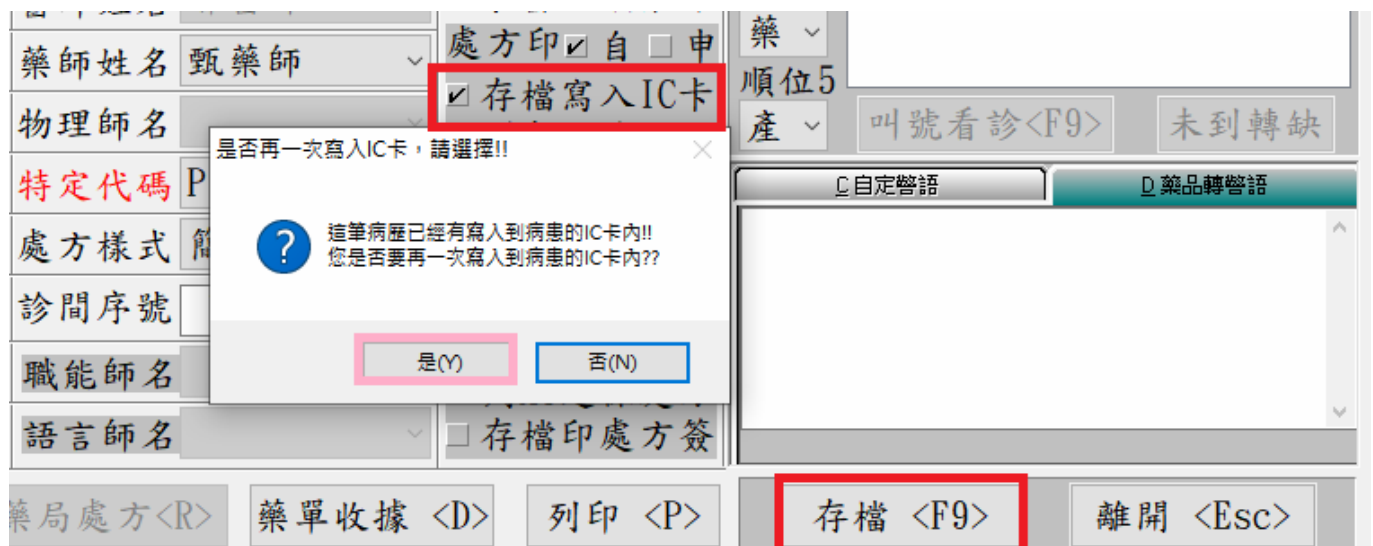

點選『取消寫卡更新上傳』即可！

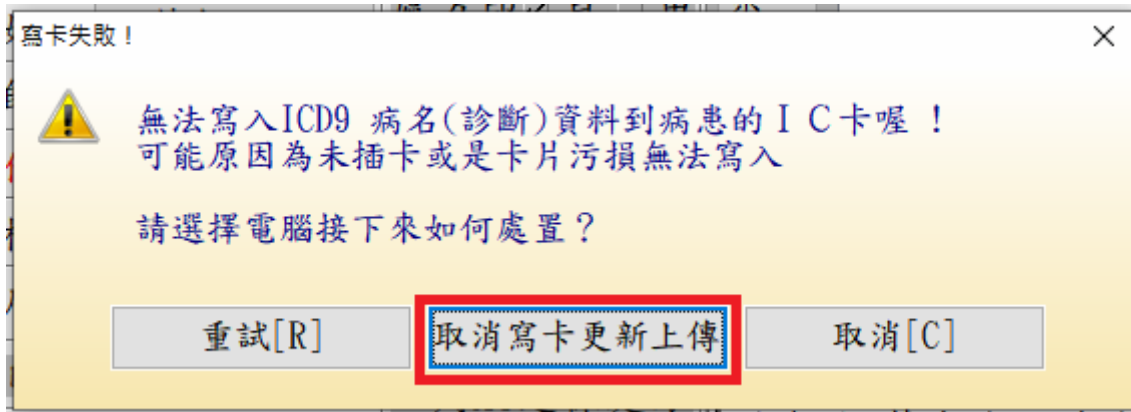

註：若是異常掛號病歷，不會出現上述寫入 IC 卡相關訊息，會直接更新 IC 上傳資料

完成此更新後，建議補正 IC 上傳後，再重新執行檢驗資料上傳作業！

■ 基本資料段錯誤說明－型態二

Code:XXXXXC 對應不到相對應的檢驗資料數值

若是檢驗結果資料尚未登打或尚未執行檢驗資料轉入時，可忽略此錯誤

點選【未對應(X)】可查看對應不到檢查報告資料的醫令項目

上傳	項	檢驗項目名稱	檢驗結果	單位	參考值	檢體採檢	檢驗方法
<input type="checkbox"/>	1	14065C流感A型抗原	陽性	N/A	陰性	鼻腔拭	快篩試劑
<input type="checkbox"/>	2	EKG 心電圖		影像			
<input type="checkbox"/>	3	14066C流感B型抗原	陰性	N/A	陰性	鼻腔拭	快篩試劑
<input type="checkbox"/>	4	GLUCOSE AC	120.00	mg/dl	70-100	血液	全自動儀

病理, 影像 資料

未對應(2)  編輯影像報告

若否，確認『檢查報告』相關檢驗項目結果資料是否完整

檢查報告日期 : . . 1/2 檢查報告 確診追蹤

檢查項目(學名/成份)	檢驗值	檢查結果	參考範圍
HbA1c	6.50		0.00~5.70 正常

檢查報告欄位未轉入或未輸入需上傳檢驗結果內容時
於論質檢驗作業系統會出現(對應不到資料值)訊息

請確認 如果是不需上傳結果項目可忽略此訊息
若是需上傳的項目，請完善結果後再重新執行檢驗上傳


■ 基本資料段錯誤說明－型態三

Code:XXXXXC 對應不到相對應的檢驗資料數值

點選【未對應(X)】可查看對應不到檢查報告資料的醫令項目

上傳	項	檢驗項目名稱	檢驗結果	單位	參考值	檢體採檢	檢驗方法
<input type="checkbox"/>	1	14065C流感A型抗原	陽性	N/A	陰性	鼻腔拭	快篩試劑
<input type="checkbox"/>	2	EKG 心電圖		影像			
<input type="checkbox"/>	3	14066C流感B型抗原	陰性	N/A	陰性	鼻腔拭	快篩試劑
<input type="checkbox"/>	4	GLUCOSE AC	120.00	mg/dl	70-100	血液	全自動儀

病理, 影像 資料

未對應(2)  編輯影像報告

確認『檢查報告』相關檢驗項目資料是否完整

檢查項目(學名/成份)	檢驗值	檢查結果	參考範圍
ALT	12.00		0.00~40.00 正常
Glucose A.C	88.00		70.00~99.00 正常
Uric Acid	3.50		2.00~7.50 正常
K-4	0.00		0.00~0.00 正常

注意！若檢驗資料完整仍出現上述訊息，表示檢查報告區內的該檢驗項目的藥品資料 Code 有誤或有缺，此狀況多發生在使用檢驗轉入系統用戶，可電洽醫聖客服專員連線協助處理！

注意！若有開立一般檢驗(查)項目對象，卻未出現在論質檢驗作業系統右側上傳名單區時，亦請電洽醫聖客服專員連線協助查看確認處理！

基本資料段錯誤說明－型態四

The screenshot shows a software interface for test results. At the top, there is a search bar with the text '檢驗與檢查報告' and a button labeled 'DMCKD'. Below this is a table with the following columns: '上傳', '項', '檢驗項目名稱', '檢驗結果', '單位', '參考值', '檢體採檢', and '檢驗方法'. The first row is highlighted in red and contains the following data: '1', '14051C C型肝炎病毒抗', '0.80', 'N/A', '0-1', '血液', and 'Chemilumi'. Below the table, a dialog box titled '轉檔錯誤明細表' is open. It contains a table with columns: '姓名', '病歷號', '看診日', and '基本資料段錯誤說明'. The first row of this table contains the following data: '金富貴', '888888', '112.09.24', and '醫令碼為14051C 或12185C 檢驗結果陽陰性判斷請填入 '-+U''. The dialog box also features navigation buttons and a close button (X).

■ 依規定檢驗結果需上傳陽陰性判斷醫令項目操作方式

醫令碼為 14051C 或 12185C 或 12215C 或 14084C 時
檢驗結果陽陰性判斷必填

1 : Positive

0 : Negative

U : Not Determined

輸入方式如下，於檢查結果欄位輸入「-或+或U」

The screenshot shows a software interface for test results. At the top, there is a search bar with the text '檢查報告日期' and a button labeled '1/2'. Below this is a table with the following columns: '檢查項目(學名/成份)', '檢驗值', '檢查結果', and '參考範圍'. The first row of this table contains the following data: '14051CC型肝炎病毒抗', '0.80', '-', and '0.00~0.00 正常'. The '檢查結果' column is highlighted in blue and has a red box around it. At the top right, there are two radio buttons: '檢查報告' (selected) and '確診追蹤'.



仕詮資訊有限公司

醫聖診療系統 親切 專業 誠信 永續

非常感謝您使用醫聖診療作業系統
如果您對本手冊操作內容有不明瞭或任何建議，
歡迎您來電本公司客服專員為您說明或給予指教！

仕詮資訊有限公司（醫聖診療系統）

新北市三重區長壽街 126.128 號 1 樓

TEL：(02) 8972-5837 FAX：(02) 8972-5841

高雄市三民區德北街 1 號

TEL：(07) 315-4932；315-4871 FAX：(07) 315-4827

手機服務專線：0939-373262；0982-218581；0982-218876

Internet 網址 <https://www.sc-dr.com.tw>

VPN 網址 <http://10.252.230.2>